



ASUS VivoWatchTM

/ H e a l t h c a r e

E-příručka

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Záruka na produkt a služby nebudou poskytnuty, pokud: (1) produkt byl opraven, upraven nebo změněn jinak než v souladu s písemným souhlasem ASUS anebo (2) pokud bylo znečistěněno nebo odstraněno výrobní číslo.

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUČÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNÉ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighy příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků <http://support.asus.com>

Obsah

O této příručce	5
Konvence použité v této příručce	6
Typografie	6
Kapitola 1: Začínáme	
Seznámení s ASUS VivoWatch	8
Nabíjení ASUS VivoWatch.....	12
Kapitola 2: Používání ASUS VivoWatch	
Instalace doprovodné aplikace	16
První spárování	16
Procházení zařízení ASUS VivoWatch.....	17
Hlavní obrazovka zařízení ASUS VivoWatch.....	17
Odemknutí zařízení ASUS VivoWatch	17
Funkce zařízení ASUS VivoWatch.....	18
Activity (Aktivita).....	18
Alarm (Budík).....	19
UV index20	
Pulse (Tepová frekvence)	21
Záznamy ASUS VivoWatch	22
Index štěstí.....	23
Sleep Info (Informace o spánku)	24
Exercise Info (Informace o cvičení).....	24
Režim cvičení	25
Hlavní obrazovka režimu cvičení.....	25
Upozornění na Incoming call (příchozí volání)	27
Upozornění na plánovaný cíl	27
Walk reminder (Připomenutí chůze)	28

Kapitola 3: Telefonní aplikace ASUS VivoWatch

Hlavní obrazovka HiVivo.....	30
Zásuvka aplikace HiVivo	31
Devices (Zařízení)	32
Network (Síť).....	33
Změna ciferníku.....	34
Změna jazyka.....	36
Nastavení denního cíle.....	37
Aktualizace firmwaru	39

Přílohy

O této příručce

Tato příručka poskytuje informace o hardwaru a softwaru ASUS VivoWatch, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Začínáme

Tato kapitola obsahuje podrobný popis hardwarových částí zařízení ASUS VivoWatch a pokyny pro používání jednotlivých částí zařízení ASUS VivoWatch.

Kapitola 2: Používání ASUS VivoWatch

Tato kapitola obsahuje přehled o používání zařízení ASUS VivoWatch.

Kapitola 3: Telefonní aplikace ASUS VivoWatch

Tato kapitola obsahuje informace o některých funkcích doprovodné aplikace, které lze používat ve vašem spárovaném telefonu.

Přílohy

Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k ASUS VivoWatch.

Konvence použité v této příručce

Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástí ASUS VivoWatchu a dat.

Typografie


Tučné = Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Ležaté = Označuje části v této příručce, podle kterých můžete postupovat.

1

Začínáme

Seznámení s ASUS VivoWatch

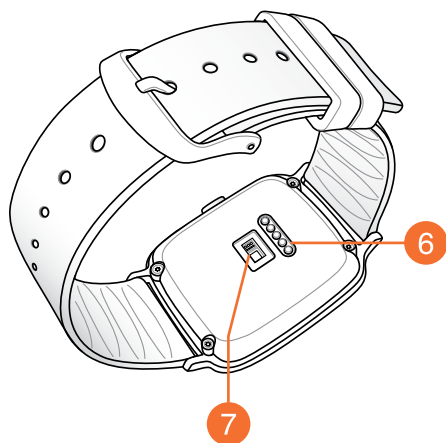

POZNÁMKA: Zařízení ASUS VivoWatch splňuje třídu krytí IP67 odolnosti proti prachu a vodě.

1 Dotykový zobrazovací panel

Dotykový displej umožňuje ovládat zařízení ASUS VivoWatch gesty.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část *Procházení zařízení ASUS VivoWatch* v této elektronické příručce.

2 UV snímač

UV snímač měří úroveň ultrafialového záření ve vašem aktuálním umístění a zobrazuje výsledek na displeji.

3 Indikátor LED

Indikátor LED vizuálně signalizuje stav zařízení ASUS VivoWatch.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část *Informace LED* v této elektronické příručce.

4 Tlačítko Domů

Stisknutím tohoto tlačítka na zařízení ASUS VivoWatch se vrátíte na hlavní obrazovku. Stisknutím tohoto tlačítka můžete rovněž odemknout zařízení ASUS VivoWatch.

5 Řemínek

Zařízení ASUS VivoWatch můžete nosit na řemínku na zápěstí.

6 Nabíjecí konektory

Chcete-li zařízení ASUS VivoWatch nabít, zorientujte a připojte tyto nabíjecí konektory k nabíjecím kolíkům nabíjecího držáku.

7 Snímač tepové frekvence

Snímač tepové frekvence měří vaši tepovou frekvenci a zobrazuje výsledek na obrazovce.

Informace LED

Obecný režim


Barva	Stav
Bliká zeleně	Baterie se nabíjí.
Svítí zeleně	Baterie je zcela nabitá.

Režim cvičení

Barva	Stav
Bliká zeleně	Normální tepová frekvence.
Bliká červeně	NEBEZPEČÍ! Abnormální tepová frekvence.

VAROVÁNÍ! V případě nenormální tepové frekvence bliká indikátor LED červeně. Mohlo by k tomu dojít, když je aktuální cvičení příliš intenzivní.

Nabíjecí držák

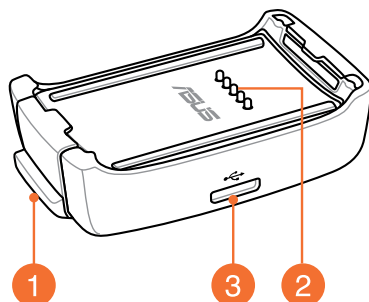

POZNÁMKA: Podrobné pokyny k používání nabíjecího držáku viz část *Nabíjení zařízení ASUS VivoWatch* v této elektronické příručce.

1 Pružinový zámek

Stisknutím tohoto pružinového zámku uvolníte zařízení ASUS VivoWatch z nabíjecího držáku.

2 Nabíjecí kolíky


Připojením těchto kolíků k napájecím konektorům se zařízení ASUS VivoWatch nabíjí a napájí.

3 Port micro USB

Při připojování nabíjecího držáku ke zdroji napájení připojte přiložený micro USB konektor kabelu USB k tomuto portu.

Nabíjení ASUS VivoWatch


1. Připojte napájecí kolíky k napájecím konektorům.

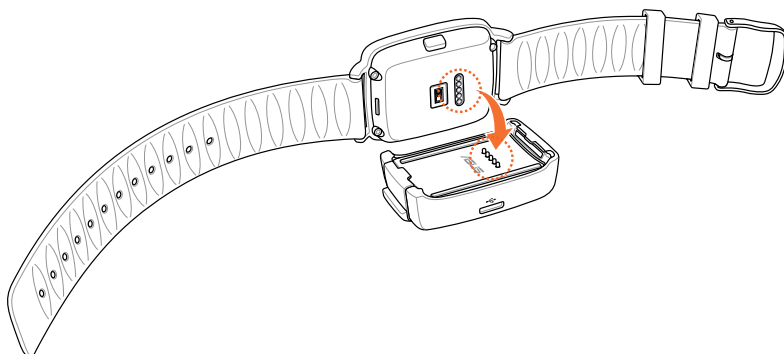


POZNÁMKA:

- Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou napájecí kolíky a konektory čisté.
 - Po používání zařízení ASUS VivoWatch při vodních sportech nezapomeňte důkladně opláchnout napájecí kolíky a konektory pitnou vodou a vysušit, aby se zabránilo korozi.
-

2. Připojte micro USB ke kabelu USB k napájecímu adaptéru a potom připojte napájecí adaptér k nejbližší elektrické zásuvce.

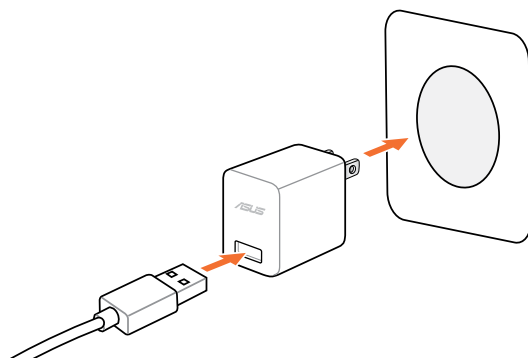

3. Chcete-li zahájit nabíjení zařízení ASUS VivoWatch, připojte micro USB ke kabelu USB k nabíjecímu držáku.

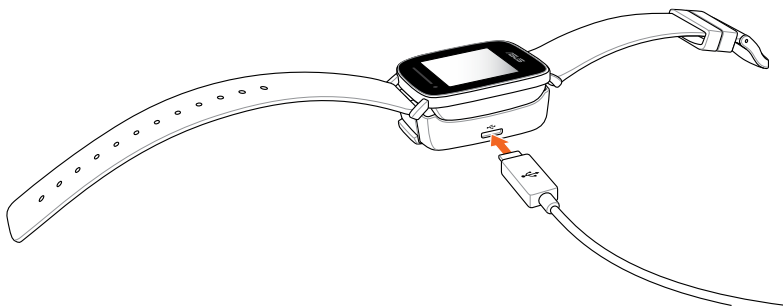

POZNÁMKA: Po úplném nabití se zařízení ASUS VivoWatch automaticky zapne.

VAROVÁNÍ!

- Nesprávné připojení k nabíječce může způsobit vážné poškození zařízení ASUS VivoWatch. Na žádné poškození způsobené nesprávným používáním se nevztahuje záruka.
 - Nezkratujte kolíky na nabíjecím držáku.
 - Některé nabíječky nemohou zařízení ASUS VivoWatch nabíjet, protože nedokáží detekovat slaboproudá zařízení.
-

[illegible]

2

Používání ASUS VivoWatch

Instalace doprovodné aplikace

1. Ve vašem telefonu se přihlaste k účtu Google nebo Apple ID nebo se zaregistrujte.
2. Spusťte **Play Store** nebo **Apple Store**.



3. Vyhledejte **HiVivo** a potom nainstalujte doprovodnou aplikaci.



První spárování

DŮLEŽITÉ!

- Před párováním zapněte funkci Bluetooth ve vašem telefonu.
- Zajistěte, aby se zařízení ASUS VivoWatch nacházelo ve vzdálenosti do tří metrů od telefonu.

1. Zapněte napájení zařízení ASUS VivoWatch.
2. Spusťte aplikaci **HiVivo**.
3. Postupujte podle pokynů zobrazených na telefonu a na zařízení ASUS VivoWatch.

POZNÁMKA: Následující obrazovka se zobrazí, když se jiný telefon pokouší připojit k vašemu zařízení ASUS VivoWatch. Chcete-li připojení povolit, stiskněte **Home button (tlačítko Domů)**; chcete-li jej ignorovat, nedělejte nic.




Procházení zařízení ASUS VivoWatch

Hlavní obrazovka zařízení ASUS VivoWatch

Na hlavní obrazovce zařízení ASUS VivoWatch se zobrazuje čas, datum a stav zařízení ASUS VivoWatch.

POZNÁMKA: Stisknutím **Home button (tlačítka domů)** se můžete vrátit na tuto obrazovku.

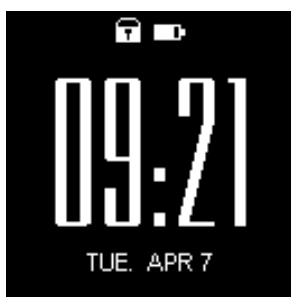

Ikona	Popis
	Zamknuto
	Stav baterie
	Režim cvičení
	Záznam spánku
	Budík

Odemknutí zařízení ASUS VivoWatch

Stisknutím **Home button (tlačítka domů)** odemkněte zařízení ASUS VivoWatch. Po odemknutí můžete procházet funkce zařízení ASUS VivoWatch.

POZNÁMKA: Po uplynutí intervalu nečinnosti se zařízení ASUS VivoWatch vrátí na hlavní obrazovku a zamkne se, aby se zabránilo nežádoucímu používání.

Funkce zařízení ASUS VivoWatch

Zařízení ASUS VivoWatch zobrazuje informace o stavu vaší denní aktivity, délku cvičení a kvalitu spánku; tyto informace pomáhají žít zdravěji.

POZNÁMKA: Obrazovky uvedené v této příručce jsou pouze orientační.

Pokyny pro procházení funkcí zařízení ASUS VivoWatch:

Potažením prstu vlevo nebo vpravo na hlavní obrazovce zařízení ASUS VivoWatch procházíte funkce zařízení ASUS VivoWatch.




Activity (Aktivita)

Na této obrazovce se zobrazují kroky, které jste ušli, a kalorie, které jste spálili. Zařízení ASUS VivoWatch automaticky počítá každý krok, který učiníte, a převádí jej na spálené kalorie. Můžete sledovat denní statistiky tak, jsou zaznamenávány.



Alarm (Budík)

Na této obrazovce lze nastavit budík. Budík uložený v zařízení ASUS VivoWatch funguje nezávisle na budících nastavených v telefonu. Budík lze rovněž nastavit v doprovodné aplikaci.

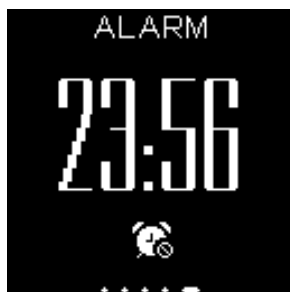

Pokyny pro nastavení budíku:

1. Přejděte na obrazovku **Alarm (Budík)**.
2. Jedním klepnutím na obrazovku začne blikat zobrazení času budíku.
3. Posouváním nahoru nebo dolů na pozici hodiny a minuty změňte čas.
4. Jedním klepnutím na obrazovku nastavte budík.


Pokyny pro zapnutí nebo vypnutí budíku:

1. Přejděte na obrazovku **Alarm (Budík)**.
2. Klepněte a podržte prst na obrazovce alespoň tři (3) sekundy.
3. Když je budík zapnutý, hodiny budíku svítí; když je budík vypnutý, hodiny budíku jsou zastřené.

POZNÁMKA: Když je budík zapnutý, na hlavní obrazovce se rovněž zobrazí ikona Budík.

UV index

Na této obrazovce je zobrazen aktuální UV index. Snímač na zařízení ASUS VivoWatch automaticky detekuje intenzitu UV záření okolo vás.

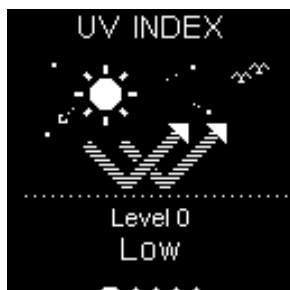


Nasměrujte UV zařízení ASUS VivoWatch směrem ke slunci a po dokončení měření se na obrazovce zobrazí úroveň UV.

Poznámka:

- Měření UV indexu se mohou lišit v závislosti na způsobu měření a prostředí, ve kterém je měření prováděno.
 - Funkce měření UV index není určena pro zdravotnické účely. Hodnota UV indexu je pouze orientační.
 - Neblokujte UV snímač; v opačném případě by mohla být měření UV indexu nepřesná.
 - Pokud se UV snímač znečistí, před měřením jej očistěte.
-

Pulse (Tepová frekvence)

Na této obrazovce se zobrazuje vaše aktuální tepová frekvence. Snímač na zařízení ASUS VivoWatch automaticky snímá vaši aktuální tepovou frekvenci.

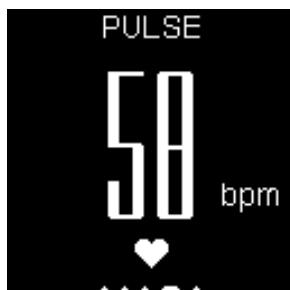

Ke snímání tepové frekvence používá zařízení ASUS VivoWatch odraz paprsku snímače procházejícího kůží. Způsob nošení hodinek je důležitý, protože může omezit účinnost snímače tepové frekvence.

Pokyny pro dosažení přesnějších výsledků:

1. Zařízení ASUS VivoWatch noste normálně ciferníkem nahoru tak, aby se spodní strana zařízení ASUS VivoWatch dotýkala vaší kůže a aby zařízení ASUS VivoWatch směřovalo od zápěstní kosti.
2. Noste zařízení ASUS VivoWatch tak, aby to bylo pro vás co nejpohodlnější. Neutahujte řemínek zařízení ASUS VivoWatch příliš na zápěstí.
3. Nejpresnější výsledky tepové frekvence získáte, když jste zahřátí.

VAROVÁNÍ!

- Přesnost snímače tepové frekvence se může lišit podle podmínek a prostředí měření. Pokud se snímač tepové frekvence znečistí, očistěte jej a opakujte akci.
 - Nedívejte se přímo do snímače tepové frekvence - paprsek snímače by mohl poškodit váš zrak.
 - Zajistěte, aby se děti nedívaly přímo do světelného paprsku.
-

Záznamy ASUS VivoWatch

Zařízení ASUS VivoWatch vede každodenní statistiky vašeho cvičení a spánku.

Pokyny pro procházení vašich záznamů:

Potažením prstu nahoru nebo dolů na hlavní obrazovce ASUS VivoWatch můžete procházet záznamy vašich osobních aktivit.



Index štěstí

Tato obrazovka ukazuje váš index štěstí. Zařízení ASUS VivoWatch automaticky určuje váš index štěstí na základě informací, například podle stavu vaší denní aktivity, délky cvičení a kvality spánku.



Index štěstí	Stav
100-85	Vynikající
75-85	Dobrý
60-75	Přijatelný
< 60	Pokračujte v úsilí

Sleep Info (Informace o spánku)

Tato obrazovka ukazuje celkový čas vašeho spánku a čas pohodlného spánku. Zařízení ASUS VivoWatch automaticky uchovává celkový čas vašeho spánku a čas pohodlného spánku. Můžete sledovat celkový čas vašeho spánku a čas pohodlného spánku během záznamu.



Exercise Info (Informace o cvičení)

Na této obrazovce je zobrazen váš čas cvičení a aerobní čas. Zařízení ASUS VivoWatch automaticky uchovává čas vašeho každodenního cvičení a aerobní čas. Můžete sledovat čas vašeho každodenního cvičení a aerobní čas během záznamu.



Režim cvičení

Režim cvičení umožňuje sledovat vaše cvičení. Když je režim cvičení zapnutý, zařízení ASUS VivoWatch zaznamenává informace o vašem aktuálním cvičení a ukazuje zaznamenávané informace.

Pokyny pro vstup do režimu cvičení:


Stisknutím a podržením **Home button (tlačítka domů)** alespoň čtyři (4) sekundy vstupte do režimu cvičení.

Pokyny pro ukončení režimu cvičení:

Stisknutím a podržením **Home button (tlačítka domů)** alespoň čtyři (4) sekundy ukončete režim cvičení.

Hlavní obrazovka režimu cvičení


Na hlavní obrazovce režimu cvičení se zobrazuje čas cvičení, tepová frekvence a další informace o aktuálním cvičení.

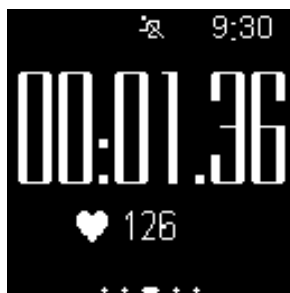

POZNÁMKA: Stisknutím **Home button (tlačítka domů)** se můžete vrátit na tuto obrazovku.

Pokyny pro zobrazení dalších informací o cvičení:

Potažením prstu vlevo nebo vpravo na hlavní obrazovce cvičení zobrazíte další informace o aktuálním cvičení.

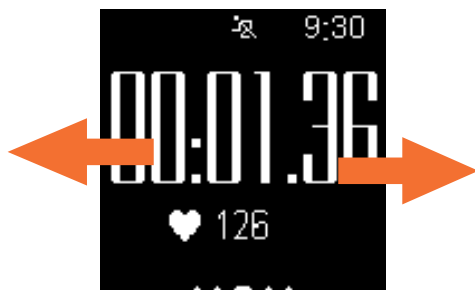

VAROVÁNÍ! V případě nenormální tepové frekvence bliká indikátor LED červeně. Mohlo by k tomu dojít, když je aktuální cvičení příliš intenzivní.

Upozornění na Incoming call (příchozí volání)

Zařízení ASUS VivoWatch umožňuje sledovat příchozí volání. Když vám někdo volá na váš spárovaný telefon, zařízení ASUS VivoWatch vibruje a zobrazuje číslo volajícího.



Upozornění na plánovaný cíl

Zařízení ASUS VivoWatch zobrazí upozornění, když splníte plánované cíle. Plánované cíle lze nastavit v aplikaci **HiVivo**.



POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část *Nastavení denního cíle* v této elektronické příručce.

Walk reminder (Připomenutí chůze)

Zařízení ASUS VivoWatch vám touto obrazovkou připomíná, abyste se zvedli a pohybovali. Tato obrazovka se zobrazí, když se určitou dobu nepohybujete.




3

***Telefonní aplikace ASUS
VivoWatch***

Hlavní obrazovka HiVivo


Na hlavní obrazovce HiVivo se zobrazuje stejný HI (index štěstí), jako na spárovaném zařízení ASUS VivoWatch. Rovněž umožňuje přistupovat k dalším informacím o vašich denních statistikách.

POZNÁMKA: Další podrobnosti o získání doprovodné aplikace viz část *Instalace doprovodné aplikace* v této elektronické příručce.

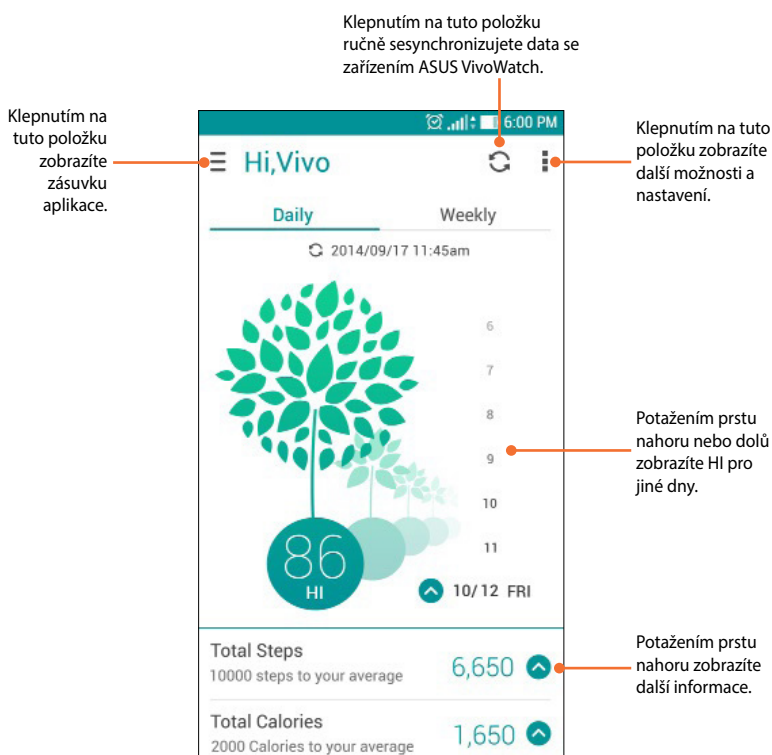


Zásuvka aplikace HiVivo

Zásuvka aplikace umožňuje přistupovat k různým obrazovkám a nastavení zařízení. Můžete rovněž zobrazit aktuální uživatelský profil a upravovat profily.

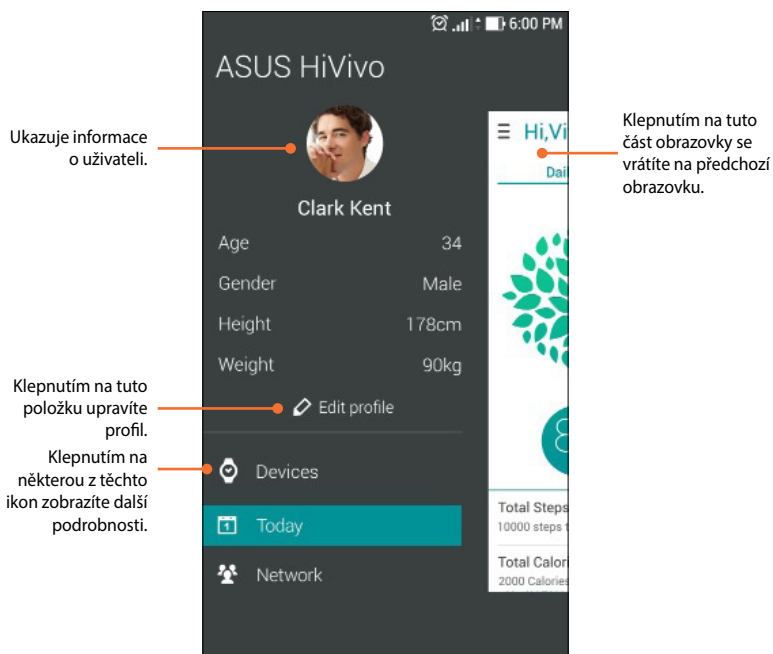

Devices (Zařízení)


Na obrazovce zařízení můžete sledovat úroveň baterie a další informace o zařízení ASUS VivoWatch. Můžete rovněž přizpůsobovat ciferník a měnit nastavení zařízení ASUS VivoWatch.

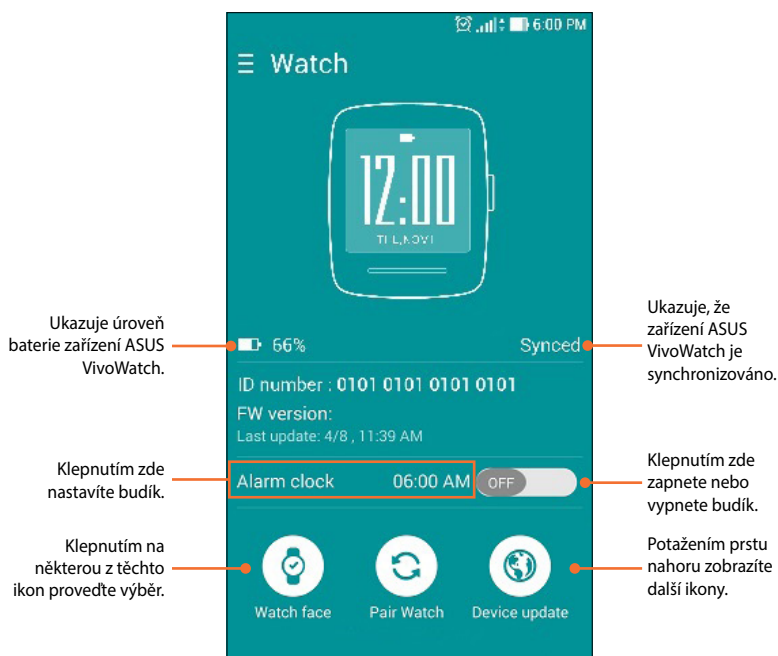

POZNÁMKA: Po nastavení budíku nezapomeňte sesynchronizovat zařízení ASUS VivoWatch.

Network (Sít)


Na obrazovce sítě můžete sledovat stavu aktivity vašich přátel. Rovněž můžete vašim přátelům zasílat zprávy.

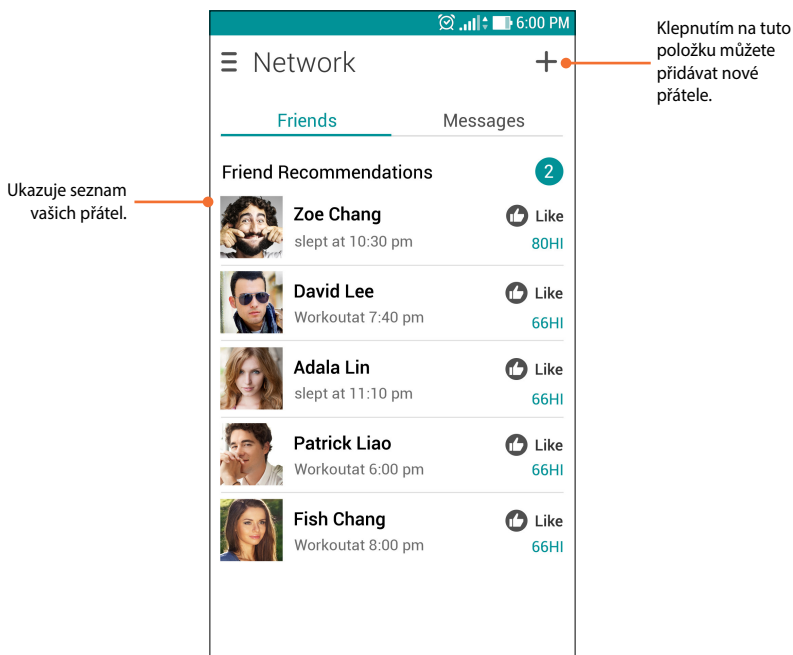

Změna ciferníku


Můžete změnit ciferník zařízení ASUS VivoWatch pro nový vzhled.

1. Přejděte na obrazovku zařízení.

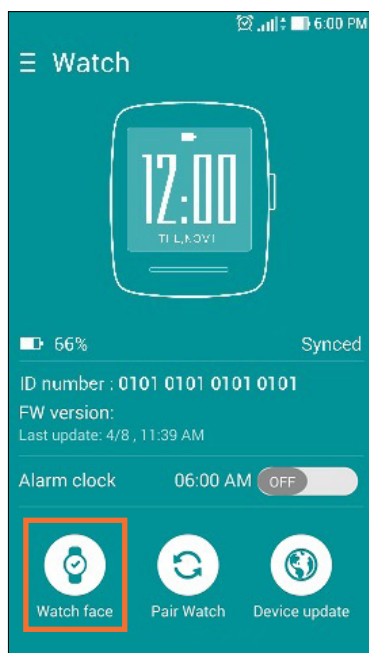

2. Klepněte na ikonu **Watch face (Ciferník)**.

3. Klepněte na některý ciferník a potom klepněte na **Sync my watch (Synchronizovat moje hodinky)**.

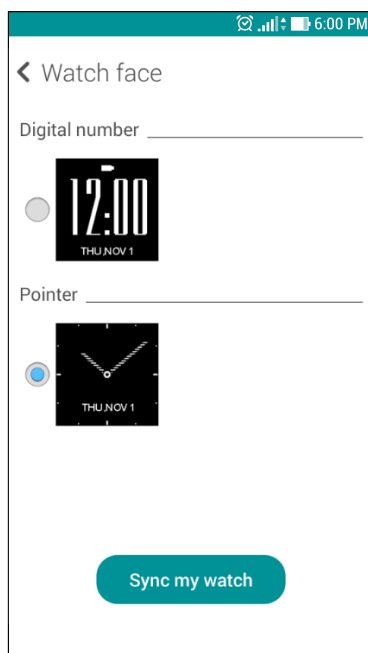


POZNÁMKA: Další ciferníky budou k dispozici v budoucích aktualizacích.

Změna jazyka

Můžete změnit jazyk uživatelského rozhraní doprovodné aplikace.

1. Přejděte na obrazovku zařízení.

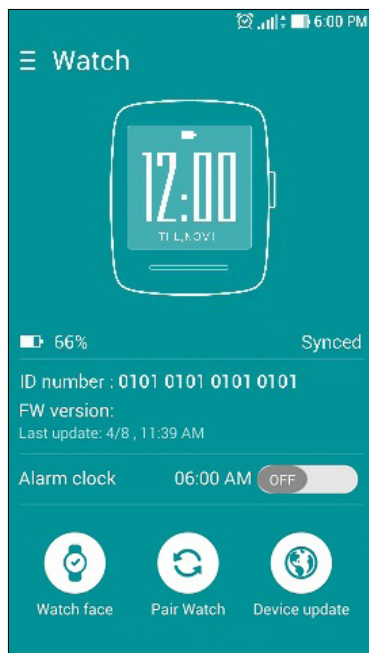


2. Potažením prstu nahoru zobrazíte další ikony.
3. Klepněte na ikonu **Language (Jazyk)** a potom vyberte jazyk.

Nastavení denního cíle

Můžete nastavit cílový počet kroků za den, celkové množství spálených kalorií za den a čas jít spát.

1. Přejděte na hlavní obrazovku aplikace HiVivo.
2. Klepněte na ikonu  a potom klepněte na **Settings (Nastavení)**.

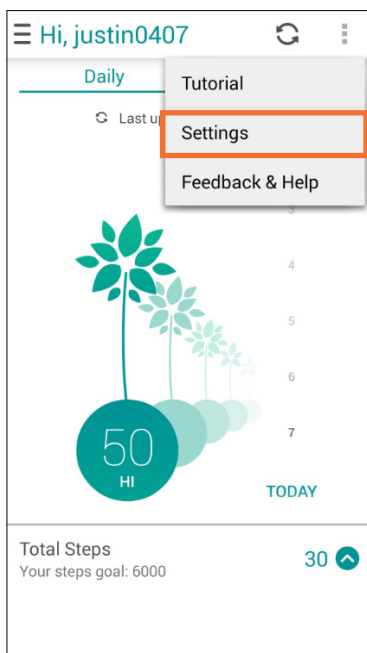

3. Klepněte na **Target (Cíl)**.
4. Nastavte plánované cíle a potom klepněte na **OK**.

Target

Step Per Day

My target 6000 steps

Total Calorie Per Day

My target 1982 cals


Go to bed at
Recommend 22:00

Cancel OK

Aktualizace firmwaru

Firmware zařízení ASUS VivoWatch lze zaktualizovat prostřednictvím doprovodné aplikace.

1. Přejděte na obrazovku zařízení.

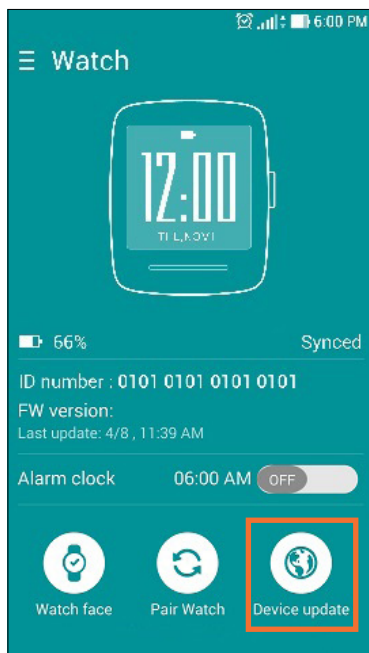

2. Klepněte na ikonu **Device update (Aktualizace zařízení)**.
3. Dokončete aktualizaci podle zobrazených pokynů.

POZNÁMKA: Doporučujeme používat nejaktuálnější firmware.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Přílohy

Přílohy

Bezpečnostní zásady

- Hodinky ASUS VivoWatch jsou voděodolné, ale nikoli voděvzdorné. Uchovávejte je v suchu a nepoužívejte je v blízkosti tekutin, v dešti, ve vlhku nebo blízkosti jiných zdrojů vody nebo tekutin. Pokud se hodinky namočí, rychle je otřete měkkým suchým hadříkem.
- Před používáním funkcí aplikace zkontrolujte, zda jsou hodinky ASUS VivoWatch suché, a dodržujte varovné štítky pro vaši osobní bezpečnost.
- V případě vytečení přestaňte používat.
- Hodinky ASUS VivoWatch a nabíjecí držák je nutno řádně recyklovat nebo zlikvidovat.
- Uchovávejte malé části mimo dosah dětí.
- Tyto hodinky ASUS VivoWatch je třeba používat pouze v prostředí s okolní teplotou mezi 5 °C a 40 °C.

Zásady pro používání baterie

- V případě vyjmutí nebo demontování může baterie použitá v tomto přístroji představovat nebezpečí požáru nebo popálení chemickými látkami.
- Dodržujte varovné štítky pro vaši osobní bezpečnost.
- Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nevhazujte do ohně.
- Zásadně se nepokoušejte zkratovat baterii.
- Nikdy nezkoušejte baterii rozebrat a sestavit.
- V případě úniku přestaňte používat.
- Baterii a její součásti je nutno recyklovat nebo řádně zlikvidovat.
- Uchovávejte baterii a ostatní malé součásti mimo dosah dětí.

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

POZOR:

Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené garantem tohoto zařízení mohou vést k odebrání oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky: (1) Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení. (2) Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Varování před rádiovým vyzařováním

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiofrekvenčnímu záření stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení nesmí být nainstalováno společně nebo propojeno s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Označení CE



Toto zařízení vyhovuje směrnici R&TTE (1999/5/EC), směrnici EMC (2004/108/EC) a směrnici o nízkém napětí (2006/95/EC), které vydala komise evropského společenství.

Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení

Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby produktů a zajišťuje splnění globálních ekologických předpisů ve všech fázích životního cyklu produktů ASUS. Společnost ASUS kromě toho také zveřejňuje relevantní informace v souladu s požadavky předpisů.

Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> ASUS plní tyto požadavky:

Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950

Evropské předpisy REACH SVHC

Korejské předpisy RoHS

Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru

ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na naší snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Správná likvidace



ASUS VivoWatch NEODSTRAŇUJTE s běžným domovním odpadem. Tento produkt byl vyvinut tak, aby bylo možné řádné opakované použití jeho dílů a recyklace. Symbol přeškrtnutého kontejneru ukazuje, že tento produkt (elektrické nebo elektronické zařízení a knoflíková baterie s obsahem rtuti) nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. V souvislosti s odstraňováním elektronických výrobků si prostudujte místní předpisy.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者
に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。 (Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Výrobce	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS VivoWatch
Model name :	HC-A01

conform with the essential requirements of the following directives:

☑2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55020:2007+A11:2011

☑1999/5/EC-R&TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

☐2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
--	---

☐2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☑2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

☑CE marking



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 31/01/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

Signature : _____